


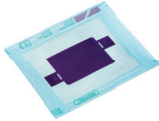




Membranen für alle Fälle

Eigenschaften und indikationsabhängige Empfehlungen zur Wahl einer Membran / Folie

	resorbierbare Membranen			nicht resorbierbare Membranen			
	Osgide®	EPI-GUIDE®	COLLAGUIDE®	Ti-Titanfolie 20 µm	Ti-Titanfolie 40 µm	OpenTex™	OpenTex™ TR
							
Herkunft	unvernetztes porcines Kollagen und Elastin	Polylactid	fibrilläres, vernetztes bovines Kollagen	Titan	Titan	PTFE	PTFE titanverstärkt
resorbierbar	+	+	+				
Barrierefunktion	bis zu 16 Wochen	bis zu 20 Wochen		Liegedauer	Liegedauer	Liegedauer	Liegedauer
Resorptionszeit		ca. 6–12 Monate	ca. 8 Monate				
biologisch	+		+				
synthetisch		+		+	+	+	+
raumschaffend			(+)	(+)	++		++
Größen	15 x 20 mm 25 x 30 mm 30 x 40 mm	18 x 30 mm	15 x 20 mm 20 x 30 mm 30 x 40 mm	30 x 40 mm	30 x 40 mm	17 x 25 mm 24 x 30 mm	✳ 17 x 25 mm ✳ 24 x 30 mm ✳ 17 x 25 mm — 12 x 24 mm ✳ 14 x 24 mm ✳ 30 x 40 mm
geeignet für Vegetarier / Veganer		+		+	+	+	+
exponierter Einsatz möglich	möglich lt. Aussagen von Anwendern	bis ca. 4 mm	möglich lt. Aussagen von Anwendern	++	++	++	+
besondere Eigenschaften / Stärken	extrem hohe Zugfestigkeit; auch angefeuchtet gut positionierbar	heilungsfördernde, einzigartige, dreidimensionale Architektur	transparent, belastbar, formbar - Augmentat sichtbar während Membranplatzierung!	schleimhautfarben; 100 % dicht; vorspannfähig	dreidimensionale Stabilität; schleimhautfarben; 100 % dicht; vorspannfähig raumschaffend	exponierte Lage möglich; einfache, atraumatische Entfernung	exponierte Lage möglich; raumschaffend
Indikationen							
GBR	+	(+)	+	+	++	+	++
GTR	+	+	+	(+)		+	
Implantologie	+	+	+	+	+	+	+
Parodontologie	+	++		(+)		(+)	
Kieferkammaufbau					++		++
mehrwandige Knochendefekte (z.B. Socket Preservation)	+	+	+			+	+
Ausrichtung	glatte Seite zum Weichgewebe	raue Seite zum Weichgewebe	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Zeichenerklärung:	+ Einsatz empfohlen (+) Einsatz möglich ++ besondere Stärke der Membran/Folie						



Medical & Dental Service
Vertriebs- und Handelsgesellschaft mbH

Büroanschrift:
Am Damm 8
D-56203 Höhr-Grenzhausen

Telefon: +49 (0) 26 24 - 94 99 - 0
Telefax: +49 (0) 26 24 - 94 99 - 29

E-Mail: service@mds-dental.de - www.mds-dental.de